


Lympha-mat Gradient Digital

gymna

Art: 110179 | Marque: LYMPHAMAT

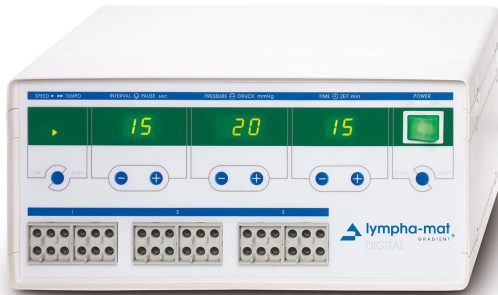

Informations sur le produit

La pressothérapie intermittente jouit, en tant que traitement complémentaire dans la phlébologie et l'angiologie, d'une excellente réputation et vient ainsi **prolonger idéalement votre traitement de drainage lymphatique manuel.**

L'appareil est puissant pour une utilisation prolongée et continue.

SYSTEME BREVETE

- Pression séquentielle intermittente.
- La pression graduelle dans le manchon est établie de la partie distale à la partie proximale :
 - la pression distale est de 100 % et la pression proximale de 70 % de la valeur affichée.
- Les manchons de traitement (non fournis) ont **12 chambres qui se superposent**:
 - elles sont remplies - une à une - d'air jusqu'à atteindre la pression de traitement souhaitée.
 - ensuite, l'air s'échappe en même temps de toutes les chambres.
- Pendant le traitement, un flux de pression continu est garanti sur toute l'extrémité.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Possibilité de raccorder simultanément 3 manchons max. avec 12 chambres chacun.
- Vitesse de compression réglable : lente ou rapide.
- Pression réglable de 20 à 120 mmHg.
- Durée de l'intervalle/de la pause réglables de 5 à 90 sec.
- Minuterie à arrêt automatique.

ATTENTION : l'appareil est livré sans manchon de traitement.

- Vous commandez uniquement le(s) manchon(s) qu'il vous faut.
- Indiquer le(s) manchon(s) souhaité(s) lors de la commande de l'appareil.

*Les manchons avec **connecteur blanc** sont conçus pour le Lympa-mat 300N.
Les manchons avec **connecteur gris** sont conçus pour le Lympa-mat Digital Gradient.
Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils.*